

## CONTENIDOR RESIDUS MÈDICS POLIPROPILÈ CEL·LULAR



Embalatge de disseny plegable per a la recollida i el transport de:

- Residus sòlids clínics segons norma **UN3291**.
- Residus citotòxics segons norma **UN3249** o **UN2811**.
- Residuos farmacéuticos.

*Fabricat amb polipropilè cel·lular reciclatge, segons norma **ISO 16103:2005**. El contenidor està fabricat en un **60%** amb **plàstic reciclat**.*

### Minimitza l'impacte mediambiental

- **Donis del seu propi procés de fabricació:**  
Per a fabricar un contenidor amb polipropilè cel·lular, es necessiten 0,35 kg de CO<sub>2</sub>, la qual cosa suposa un 25% menys en comparació amb un contenidor de plàstic rígid.
- **Durant el transport:**  
A causa de la reducció de l'espai de fins a un 50% respecte al contenidor de plàstic rígid.
- **Durant el procés d'eliminació:**  
La seva lleugeresa garanteix, en termes d'envasos rebutjats, una reducció del "pes de residus d'envasos" de fins a un -66% en comparació amb un contenidor de plàstic rígid, i en -15% en comparació amb una caixa de cartó.

### Producte de fàcil muntatge i disseny plegable

- Rápido y sencillo de montar, gracias a su forma especial.
- Mínimo espacio de almacenamiento requerido.

### Fabricat a prova de líquids

**Respecte a un contenidor en cartó, és un producte impermeable i, com a contenidor de plàstic:**

- Es manté lliure de líquids accidentals.
- No absorbeix la humitat en cas de contacte amb una superfície humida.
- Pot emmagatzemar-se fàcilment en l'exterior sense que les seves característiques es vegin afectades.


### És fàcil d'eliminar

- Totalment apte per a l'ús en acte clau.
- Respecte al contenidor en cartó, el contenidor en polipropilè cel·lular no absorbeix la humitat generada durant l'esterilització, això fa que la trituració sigui una operació fàcil, evitant també la creació d'una pesada acumulació de residus.

Minimitzar l'emmagatzematge

Aquesta caixa se subministra en paquet pla per a minimitzar l'espai d'emmagatzematge: **50%** menys que les caixes de plàstic de la mateixa capacitat.

→ Cada caixa conté una bossa de plàstic interior i un sistema de tancament de la bossa mitjançant

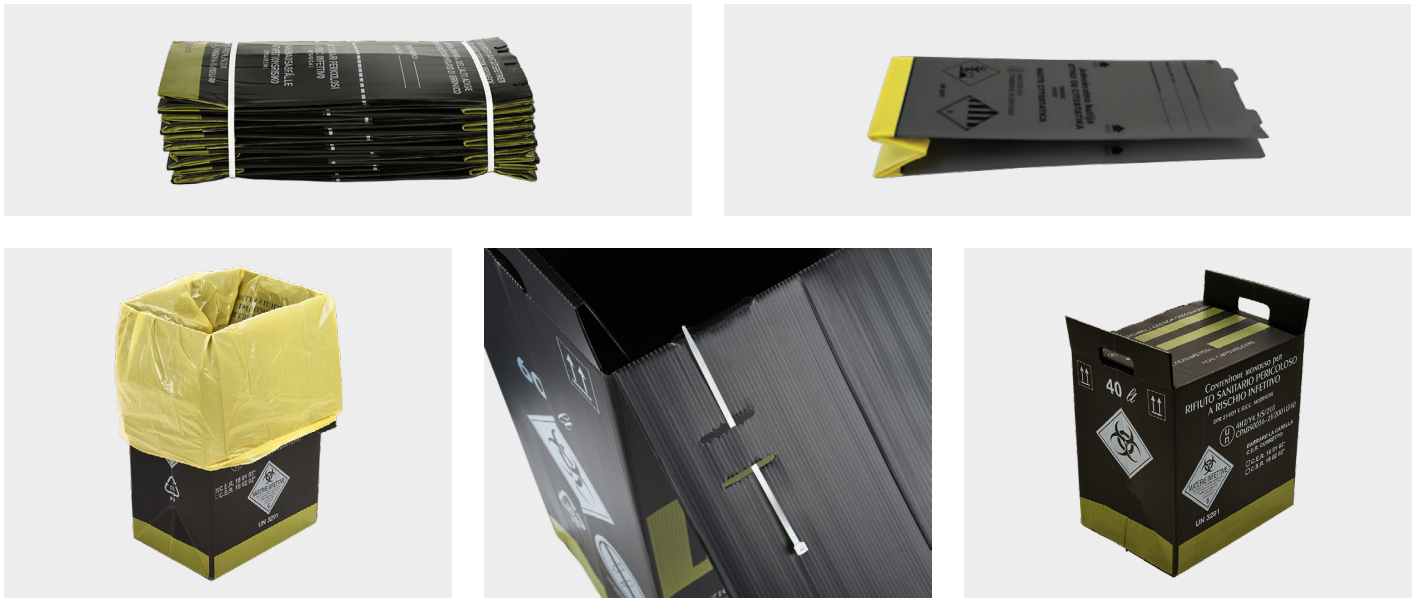

Especificacions tècniques del contenidor

| Referència      | Capacitat | Pes      | Pes màxim a suportar | Tamany             | Unitats i mesures palet      |
|-----------------|-----------|----------|----------------------|--------------------|------------------------------|
| 25L KP300 REC   | 25 litres | 0,300 kg | 7 kg                 | 250 x 235 x 450 mm | 480 unds 800 x 1200 x 220 mm |
| 50L KP300 REC   | 50 litres | 0,450 kg | 12,5 kg              | 380 x 280 x 500 mm | 330 unds 800 x 1200 x 200 mm |
| 50L KP300 H REC | 50 litres | 0,450 kg | 12,5 kg              | 380 x 280 x 600 mm | 440 unds 800 x 1200 x 220 mm |

Embalatge segons normativa europea UN + NF X 30-507 2018



Estalvia espai



Impermeable



Producte sostenible



A prova de fugides



UN aprovat




Sense làtex




Ús únic

## Obertura del contenidor

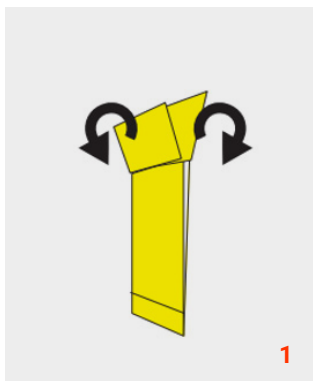

1

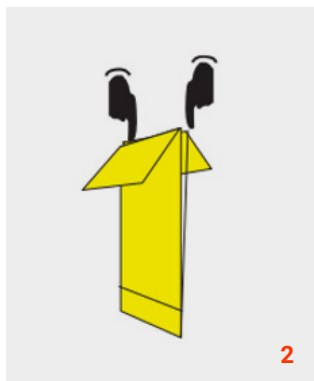

2



3



4

1. Dona-li la volta a les 2 solapes amples.

2. Col·loqui el fons de la caixa en el sòl i, a continuació, exerceixi una lleugera pressió, secundant-se en la vora superior de la caixa, sobre el sòl.

3. Gira les altres 2 solapes laterals.

4. Col·loqui l'extrem de la bossa de plàstic interior (ja inclosa), al voltant de la part superior del contenidor.

## Tancament del contenidor




1



2



3

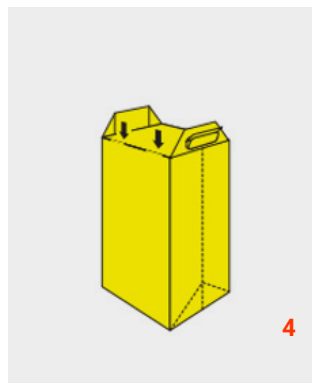

4

1. Tancament la bossa amb la brida plàstica situada en la ranura interior de la solapa núm. 2.

2. Doblega les solapes laterals per a formar les anses.

3. Gira cap a l'interior de la solapa núm. 2 (tancament temporal).

4. A continuació, gira la solapa núm. 1 cap a l'interior i fixi en les dues ranures les petites solapes situades al llarg de la vora de la solapa núm. 1 (tancament permanent).

## Sectors d'ús



Farmàcia, Cosmètica,  
Perfumeria



Indústria Extractiva,  
Química